

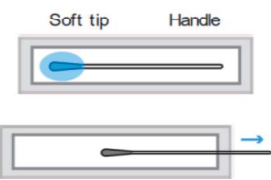
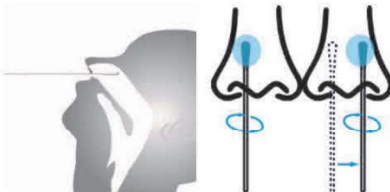


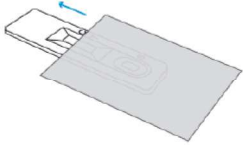
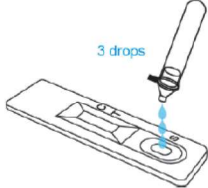

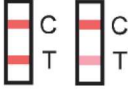




Testi protseduur




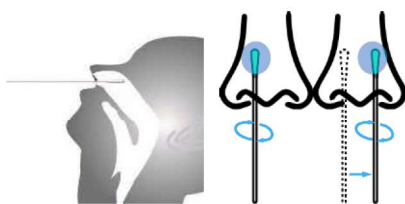


<p>①</p> 	<p>Pöörake ekstraheerimispuhvri korki.</p> <p>Ettevaatust: avage see näost eemal ja olge ettevaatlik, et vedelikku ei satuks maha.</p>
<p>②</p> 	<p>Lisage ekstraheerimistuubi proovi ekstraheerimispuhver</p> <p>Ettevaatust: vältige puhvri puudutamist vastu tuubi.</p>
<p>③</p> 	<p>Tuvastage tamponi pehme riidest ots (pildil 'soft tip'). Eemaldage tamponilt pakend ja võtke tamponi ettevaatlikult välja.</p> <p>Ettevaatust: Ärge kunagi puudutage kätega tamponi pehmet riidest otsa.</p>
<p>④</p> 	<p>Sisestage tampon ettevaatlikult ühte ninasõõrmesse. Tamponi ots tuleb sisestada vähemalt 2,5 cm kaugusele ninasõõrme servast. Rullige tamponi 3-4 korda mööda ninasõõrme limaskesta. Jätke tampon ninasõõrmesse mõneks sekundiks. Kasutades sama tamponi, korrake seda protsessi teise ninasõõrmega. Tõmmake tamponi ninaõõnest välja.</p> <p>Ettevaatust: see võib tunduda ebamugav. Ärge sisestage tamponi sügavamale, kui tunnete tugevat vastupanu või valu.</p>
<p>⑤</p> 	<p>Asetage tampon ekstraheerimistorusse. Rulli tamponi kolm kuni viis (3-5) korda. Jätke tampon 1 minutiks ekstraheerimispuhvrisse.</p>
<p>⑥</p> 	<p>Suruge ekstraktsioonitoru sõrmedega kokku ja eemaldage nii palju lahust tamponilt kui võimalik.</p>

<p>⑦</p>		<p>Paigaldage otsiku kork tihedalt proovi ekstraheerimise torule.</p>
<p>⑧</p>		<p>Enne testimist viige komplekti komponendid toatemperatuurile. Avage kott ja eemaldage kaart. Asetage kaart tasasele ja tasasele pinnale.</p> <p>Ettevaatust: pärast avamist tuleb testkaart kohe ära kasutada!</p>
<p>⑨</p>		<p>Pöörake ekstraheerimistoru tagurpidi ja lisage 3 tilka uuritavat proovi proovisüvendisse (S), pigistades ekstraheerimistoru õrnalt.</p> <p>Ettevaatust: Õhumullide teket proovisüvendis (S) tuleb vältida.</p>
<p>⑩</p>	 <p>15-20 min</p>	<p>Lugege tulemusi 15-20 minuti pärast.</p> <p>Ettevaatust: 20 minuti pärast saadud tulemused ei pruugi olla täpsed.</p>

Tulemuste lugemine

 <p>Positive</p>	<p>Positiivne: Kui 15-20 minuti jooksul ilmuvad kaks värvilist riba, millest üks on kontrolltsoonis (C) ja teine testtsoonis (T), on testi tulemus positiivne.</p> <p>Ettevaatust: Olenemata sellest, kui ähmane värviline riba on testitsoonis (T), tuleks tulemust lugeda positiivseks.</p>
 <p>Negative</p>	<p>Negatiivne: Kui kontrolltsooni (C) ilmub üks värviline riba ja testtsooni (T) 15-20 minuti jooksul värvilist riba ei ilmu, on testi tulemus negatiivne.</p>
 <p>Invalid</p>	<p>Kehtetu: Kui kontrollalale (C) 15-20 minuti jooksul värvijoont ei ilmu, on test kehtetu. Korrake testi uue testiga.</p>

Test Procedures

<p>①</p>		<p>Rotate the lid of sample extraction buffer bottle. Caution: Open it away from your face and be careful not to spill any of the liquid.</p>
<p>②</p>		<p>Squeeze all extraction buffer out of the bottle into the extraction tube. Caution: Avoid touching the bottle against the tube.</p>
<p>③</p>	 <p>Soft tip Handle</p>	<p>Identify the soft, fabric tip of the swab. Peel open the swab packaging and gently take out the swab. Caution: Never touch the soft, fabric tip of the swab with your hands.</p>
<p>④</p>		<p>Carefully insert swab into one nostril. The swab tip should be inserted no less than 2.5 cm (1 inch) from the edge of the nostril. Roll swab 3-4 times along the mucosa inside the nostril. Leave swab in the nostril for several seconds. Using the same swab, repeat this process for the other nostril. Withdraw swab from the nasal cavity. Caution: This may feel uncomfortable. Do not insert the swab any deeper if you feel strong resistance or pain.</p>
<p>⑤</p>		<p>Place swab into extraction tube. Roll swab three to five (3-5) times. Leave swab in extraction buffer for 1 minute.</p>
<p>⑥</p>		<p>Pinch extraction tube with fingers and remove the solution from swab as much as possible.</p>

⑦		<p>Install the nozzle cap onto the sample extraction tube tightly.</p>
⑧		<p>Bring the kit components to room temperature before testing. Open the pouch and remove the card. Place the card on a flat and level surface. Caution: Once opened, the test card must be used immediately.</p>
⑨		<p>Invert the extraction tube and add 3 drops of test specimen into the specimen well (S) by gently squeezing the extraction tube. Caution: The formation of air bubbles in the specimen well (S) must be avoided.</p>
⑩		<p>Read the results at 15-20 minutes. Caution: Results after 20 minutes may not be accurate.</p>

Interpretation of Results

	<p>Positive: If two colored bands appear with one colored band in the Control Zone (C) and another in the Test Zone (T) within 15-20 minutes, the test result is positive. Caution: No matter how faint the colored band is in the Test Zone (T), the result should be considered as positive.</p>
	<p>Negative: If one colored band appears in the Control Zone (C) and no colored band appears in the Test Zone (T) within 15-20 minutes, the test result is negative.</p>
	<p>Invalid: If no color line appears in the control area (C) within 15-20 minutes, the test is invalid. Repeat the test with a new test card.</p>